

## Handleiding TabTime Vibe Nieuw



### Functies

Deze pillendoos helpt om al uw dagelijkse medicijnen te organiseren en helpt u te herinneren door middel van een audio en/of een vibrerend alarm tot wel 5 keer per dag. De alarmen blijven er voor elke dag in staan (kan ook weer gemakkelijk worden aangepast) zodat u uw medicijnen nooit meer vergeet!

Functies:

- Vijf alarmen per dag met audio en/of vibrerend alarm
- Snooze functie
- Knoppen vergrendeling om onbedoelde veranderingen te voorkomen
- Een compact design en daardoor gemakkelijk mee te nemen in broekzak of tas
- Groot LCD scherm met LED achtergrondlicht


### Installeren en vervangen batterijen

Voor deze pillendoos wordt een CR2025 lithium batterij (al geplaatst) gebruikt voor de tijdfunctie en een UM4 (AAA) batterij voor het vibrerende alarm, het audio geluid en het LED achtergrondlicht.

*Volg deze stappen voor het installeren van de UM4 (AAA) batterij*


1. Schuif de **OPEN** knop in de richting van de pijl en til het bovenste deel op.
2. Plaats een nieuwe UM4 (AAA) batterij in het compartiment daarvoor zoals aangegeven volgens de polariteitsymbolen (+ en -).
3. Plaats het bovenste deel weer op het onderste deel en duw deze samen totdat u een klik hoort.

*Volg deze stappen om de CR2025 Lithium batterij te vervangen*

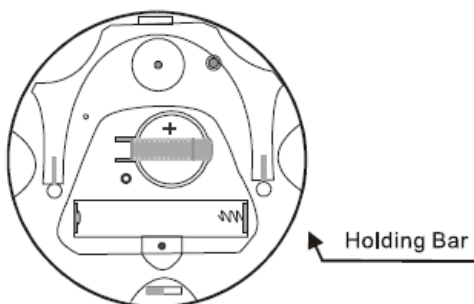

1. Schuif de **OPEN** knop in de richting van de pijl en til het bovenste deel op.
2. Schuif de 'holding bar' open in de richting van de pijl en haal het eruit.
3. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe batterij met de positieve kant (+) naar boven.
4. Plaats de 'holding bar' terug.

### Tijd instellen

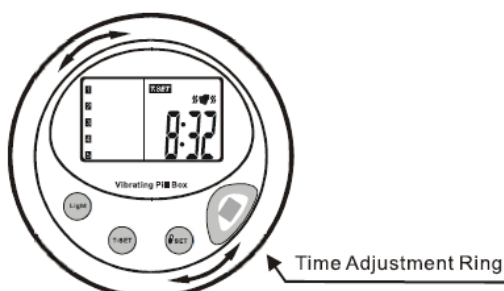

1. Ontgrendel de 'op slot' functie door het **HOLD** knopje naar beneden te schuiven.
2. Druk op **T-SET** en houdt deze knop voor 2 seconden ingedrukt. **T-SET** verschijnt op het scherm en de



uurgetallen beginnen te knipperen. Draai aan de **Time Adjustment Ring** om de juiste uren in te stellen.

3. Druk op de **T-SET** knop om de tijd te bevestigen, de minuten zullen gaan knipperen. Draai weer aan de **Time Adjustment Ring** om de juiste aantal minuten in te stellen


4. Druk weer op de **T-SET** knop om terug te gaan naar het normale scherm.

Als er meer dan 30 seconden op geen knop is gedrukt zal er automatisch terug worden gegaan naar het normale scherm.


**Let op! Soms staat niet elke klik bij het draaien van de schijf voor een tijdsverandering. Het kan dan zijn dat hij de tijd niet goed pakt waardoor niet verder gegaan kan worden met de T-SET knop. Draai dan nog een klik verder, zonder dat de tijd veranderd, en druk opnieuw op de T-SET knop.**

### De alarmen instellen.


1. Ontgrendel de 'op slot' functie door het **HOLD** knopje naar beneden te schuiven.


2. Druk op de  **-SET** knop en houdt deze 2 seconden ingedrukt. **AL. SET** zal verschijnen in het scherm en het eerste alarm zal gaan knipperen. Draai aan de **Time Adjustment Ring** om de juiste tijd van het alarm in te stellen. Elke klik veranderd de tijd met 30 minuten.

3. Om het alarm over te slaan, zet de tijd tussen PM 11:30 en 12:00. “-:--” zal verschijnen in het scherm wat indiceert dat er geen alarm is ingesteld.

4. Druk op de  **-SET** knop om het eerste alarm te bevestigen en naar het volgende alarm te gaan. Het tweede alarm zal nu gaan knipperen. Dit alarm kan weer ingesteld worden door te draaien aan de **Time Adjustment Ring**.

5. Herhaal deze stappen voor de overige 3 alarmen.

6. Druk op de  **-SET** knop om terug te gaan naar het normale scherm.

Het ingestelde alarm (geluid en/of vibratie) zal afgaan voor 30 seconden terwijl het corresponderende alarm op het scherm zal knipperen en een medicijnsymbool “” zal te zien zijn op het scherm.

a) Als er dan op geen knop wordt gedrukt zal het alarm automatisch stoppen na 30 seconden, maar zal dit alarm nog twee keer worden herhaald om de vijf minuten. Dan zal het alarm uitblijven maar het “:” teken zal blijven knipperen wat aangeeft dat de medicijnen nog niet zijn ingenomen.

b) Als er een willekeurige knop wordt ingedrukt tijdens het alarm, zal het alarm uitgaan maar wordt deze nog wel twee keer om de vijf minuten herhaald.

c) Als het medicijncompartiment is gedraaid tijdens het alarm of binnen 15 minuten voor het alarm, zal de alarmtijd veranderen naar “-:--” wat aangeeft dat de medicijnen zijn ingenomen.

### Instellen van de audio en/of het vibrerende alarm



Er zijn drie alarmsoorten waar uit gekozen kan worden: **beeps** (geluid) 📢, **vibration** (trillen) 📢📢 en **beep+vibration** 📢📢📢. Om de alarmsoort te kiezen moet aan de linkerkant van het apparaat de knop naar **BEEP**, **VIB** of **BEEP+VIB** worden geschoven. In de **BEEP+VIB** soort zal het alarm 2 seconden geluid maken, waarna het alarm 2 seconden zal trillen. Dit wordt dan herhaald.

### Opnieuw instellen van de alarmen

Alle alarmen zullen automatisch weer worden ingesteld in hun oorspronkelijk ingestelde tijd om 0:13 AM, dagelijks.

### De medicijncompartimenten vullen

Vul de genummerde compartimenten (1 tot 5) met medicijnen door de deksel te draaien om toegang te krijgen tot ieder compartiment.

### Het achtergrondlicht aanzetten

Druk op **LIGHT** om het achtergrondlicht aan te zetten voor 10 seconden

### Het resetten

Als de pillendoos abnormale functies vertoont, zoals “frozen display”, “abnormal display”, “frozen button” enz. kunt u de pillendoos resetten door met een puntig voorwerp zoals een paperclip op de **RESET** knop te drukken. De **RESET** knop zit binnen in de bovenkant van het apparaat.

### Batterij

**Voor deze pillendoos wordt 1 CR2032 batterij en 1 Um4 (AAA) batterij gebruikt.**

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van batterijen door derden.

Betreft Geheugenhulp model: 112031