




## Sleutelhanger alarm Tiffany Style

Betreft Geheughenulp artikel 107030

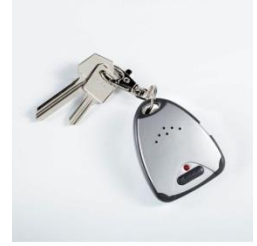

### Voor het eerste gebruik:

- Verwijder het lipje aan de achterkant van uw Medicijn Alarm, zodat de batterij geactiveerd wordt.

### Een eerste alarm instellen

- Op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, schuift u het hendeltje aan de zijkant van het apparaat naar "Set".
- Druk de ALRT knop in en houd deze ingedrukt, totdat u twee lage en 2 hoge tonen hoort; daarna loslaten. Er zal na het loslaten één toon te horen zijn. Het eerste alarm is nu ingesteld.  
**Let op!** Drukt u de ALRT knop te lang in, dan hoort u twee hoge en twee lage tonen en is het alarm weer helemaal leeg.)
- **Belangrijk!** Schuif het hendeltje aan de zijkant naar "Lock".
- Uw Medicijn Alarm zal elke dag op de ingestelde tijd piepen en het rode lichtje zal knipperen.
- U schakelt het alarm uit door op de knop ALRT te drukken.

### De volgende alarmen instellen

- Op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, schuift u het hendeltje aan de zijkant van het apparaat naar "Set".
- Druk de ALRT knop in en houd deze ingedrukt, Na een of meerdere piepjes (het aantal ingestelde alarmtijden, bv 2 piepjes betekend dat er twee alarmtijden ingesteld zijn) wacht met ingedrukte ALRT knop tot u twee lage en 2 hoge tonen hoort; daarna loslaten. Er zal na het loslaten een aantal tonen te horen zijn. Dit is het nummer van het ingestelde alarm, bv. 3 tonen is alarm 3. De nieuwe alarmtijd is nu ingesteld.  
**Let op!** Drukt u de ALRT knop te lang in, dan hoort u twee hoge en twee lage tonen en is het alarm weer helemaal leeg.)
- **Belangrijk!** Schuif het hendeltje aan de zijkant naar "Lock".
- Uw Medicijn Alarm zal elke dag op de ingestelde tijd piepen en het rode lichtje zal knipperen.
- U schakelt het alarm uit door op de knop ALRT te drukken.

### Het alarm afzetten

U drukt op de knop ALRT 2x in om het alarm af te zetten. Het apparaat zal een aantal piepjes laten horen dat overeenkomt met het aantal keren dat u een alarm heeft ingesteld. Vervolgens drukt u nogmaals op de ALRT knop. Ons advies is om eerst uw medicijnen in te nemen en daarna pas het alarm uit te zetten.

### Alle alarmen wissen

- Verschuif het hendeltje aan de zijkant naar “Set”.
- Houd de ALRT knop lang ingedrukt, totdat u de eerste piepjes hoort, vervolgens een tweetonig geluid van laag naar hoog. Nadat u een tweede tweetonig geluid van hoog naar laag hebt gehoord, kunt u de knop loslaten.
- Het apparaat is nu geschoond, er staat géén alarm meer in. Verschuif het hendeltje naar “Lock”.
- Wilt u het apparaat opnieuw instellen, volg dan de bovengenoemde procedure voor eerste en volgende alarmen instellen.

### Bijzonderheden

- Wanneer u een alarm mist, dan zal het lichtje blijven knipperen en het alarm zal iedere 10 minuten gedurende 30 seconden te horen zijn. Na het eerste uur zal het alarm elke 15 minuten te horen zijn. Het alarm zal blijven gaan, totdat u de ALRT knop indrukt. Druk de knop ALRT 2x in en het alarm is afgezet. Het rode lichtje is duidelijk zichtbaar, zodat u snel kunt zien dat u een alarm heeft gemist.
- U wilt voortijdig het alarm afzetten. Verschuif het hendeltje aan de zijkant naar “Set”. Terwijl u de knop ALRT ingedrukt houdt, verschuift u het hendeltje aan de zijkant naar “Lock”. U kunt nu de knop ALRT loslaten. Het alarm zal nu afgaan. Druk de ALRT knop in om het alarm af te zetten. Uw Medicijn Alarm zal nu het eerstvolgende ingestelde alarm overslaan en vervolgens teruggaan naar het originele programma.
- Automatische Lock  
Wanneer u een alarm heeft ingesteld, maar u vergeet het hendeltje aan de zijkant op “Lock” te zetten, dan zal het apparaat dit na 60 seconden automatisch doen. Het is echter wel belangrijk het schuifje eerst op “Lock” te zetten voor u alarmen in gaat stellen
- Batterijen  
De 2 Alkaline knoop cel batterijen van uw Medicijn Alarm zijn inbegrepen. Het zal zeer afhangen van het gebruik, hoe lang de batterijen meegaan. Na het vervangen van de batterijen (haal het schuifje weg), zal u uw Medicijn Alarm opnieuw ingesteld moeten worden.  
De knoop cel batterijen zijn zowel bij Geheugenhulp als bij diverse winkels te verkrijgen onder een van de volgende namen: AG3, LG44, LR44, SR44, GPA76, SG13, G13 of L1154.
- **TIP!** Vervang de batterijen als u het alarm opnieuw in moet stellen bij het wijzigen van de zomer- en wintertijd. Wacht niet tot ze helemaal leeg zijn.

Uw Medicijn Alarm is gepatenteerd. U heeft 1 jaar garantie, exclusief de batterijen.